




# 世界最高の低周波電子治療器

## “ラパソン”

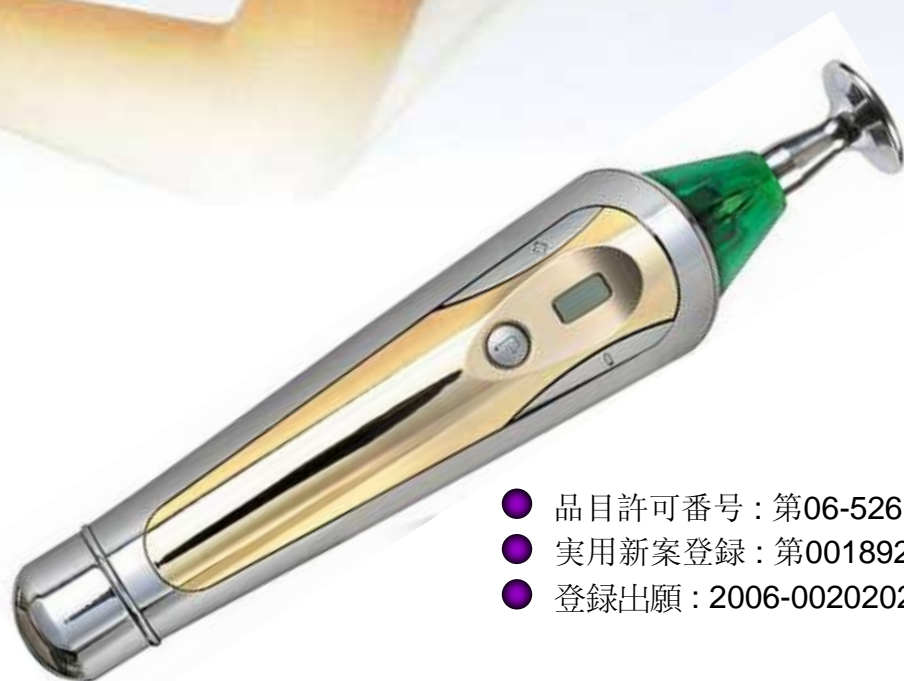

- 品目許可番号：第06-526号
- 実用新案登録：第0018927号
- 登録出願：2006-0020202




# 製品の構成



## 製品の構成

### 本体

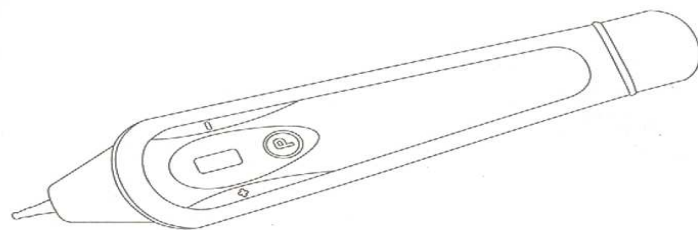

### ソフトな携帯小袋



### バッテリーホルダー



### 5つ形態の電極



顔用マッサージボール、グランプリ、鍼ボール、モーターポイントボール、頭部用タッチ棒

# 本体の名称



製品の構成

Raphael

本体の名称

---

---

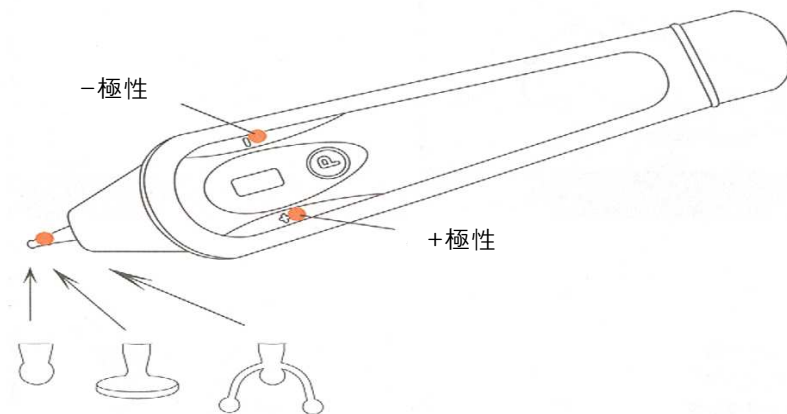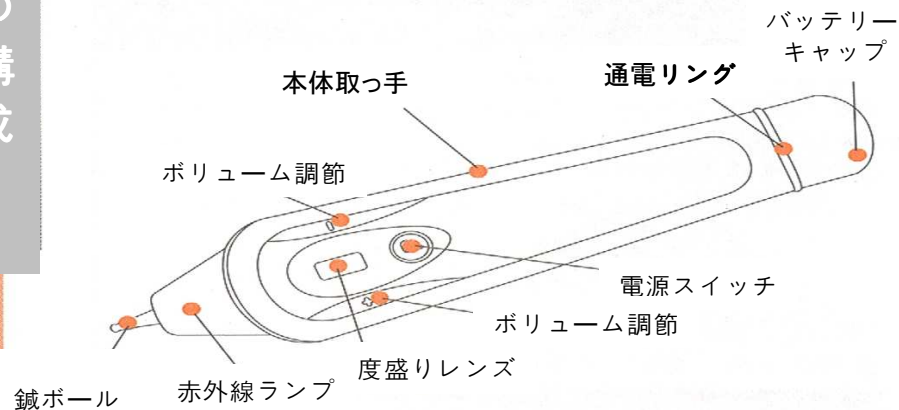


# 本体の機能

## 本体の機能

### ■ 極性機能


極性スイッチを (+) で選択すればタッチ電極は陽極で、取っ手の本体は陰極で動作します。極性スイッチを反対に (-) を選択すれば反対に動作します。タッチ電極が陽極なら神経を刺激することでまひした神経と筋肉の活動を活性化させる。タッチ電極が陰極なら神経の活動を抑制させるか鎮めてくれます。  
※ 各極性は 3秒間ずっと押していれば変わります。  
(極性は度盛りレンズに表示される)

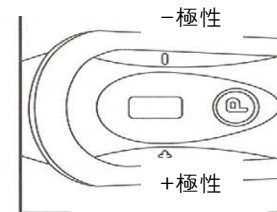

極性スイッチ

### ■ ボリューム (強弱調節)

スイッチの強度を + または - に選択した後、こまかい調整はボリューム調節の所を押しながら調整します。ボリューム1 (最小) から 9 (最大) まで調整することができます。  
使用感によって強度の選択して使ってください。

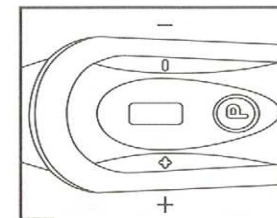

ボリューム調節

### ■ 電源遮断機能

使わない状態で15分位経過すれば自動で電源が切れます。

# 使用方法

## ■ 操作手順


1. 刺激する身体の部位を選んでください。
2. 電源スイッチを押して 0 数字を確認してください
3. 使う電極を '+' または '-' を選択してください(3秒間押す)
4. 手の平に電極をつけながら '+' または '-' のボリュームを調節してください
5. 刺激する部位をタッチしてください
6. 刺激が終われば電源スイッチを切って、遠赤外線ランプが(赤色) 消えるのを確認してください。

## ■ タッチ電極の交換

モーターポイント(丸いボール) 電極や顔マッサージボール(平たいボール) 電極が先端に挿入されている場合、電極を抜き取れば、鍼ボールが出ます。装着されたボールは左側に回せば抜けて、右側に回せば装着されます。

## ■ バッテリー交換方法

1. バッテリーキャップを左に回して抜きます。
2. バッテリーホルダーにバッテリーを入れ替えます。
3. バッテリーホルダーを本体に挿入します。
4. バッテリーキャップを右側に回します

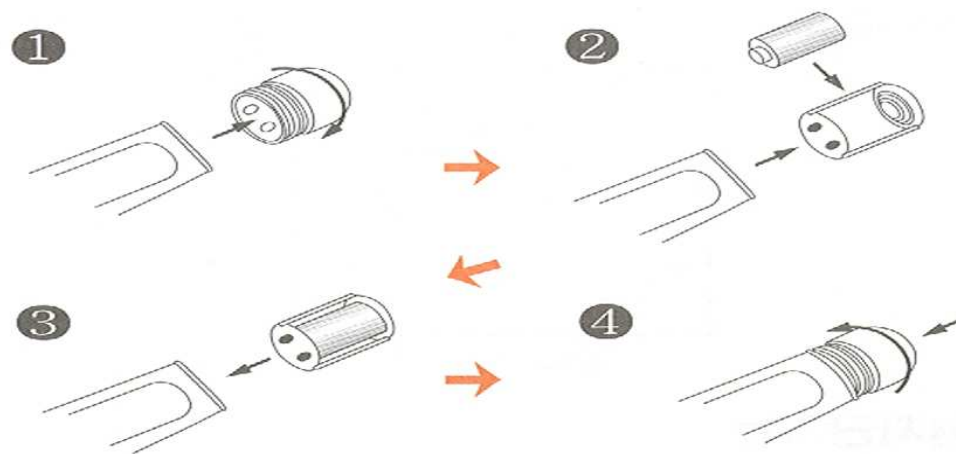


## 器具選択

この器具は 5つの電極(アダプター)を選択して使うことができます。

\*鍼ボールは肥満防止及び痛みの緩和などに使用できます。

\*顔用マッサージボール電極は皮膚の美容と敏感な部分のマッサージに適しています。

\*モーターポイントボール電極は頸肩腕症(首,肩,腕)とパソコンなどを長時間使用する方に適しています。

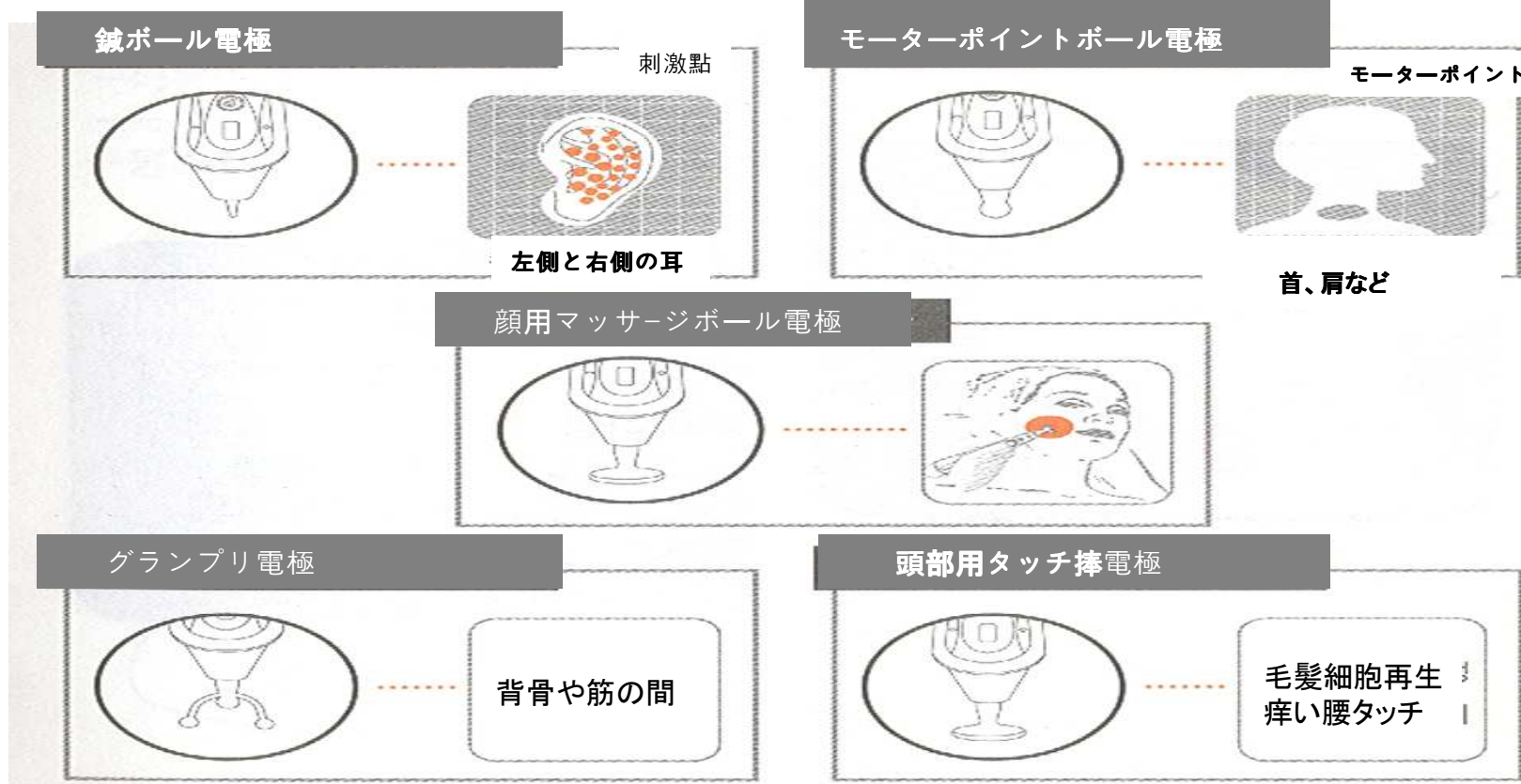


## 参照

- 痛い部分に刺激し始めれば、段々と一旦痛みがひどく感じるがありますが、一定時間(約1分)が経てば痛みが緩和されます。
- 刺激部位の感覚が弱い場合、水を1~2滴を刺激部位に湿らすと刺激が強く感じられます


## パソコンを長時間使用されている方などの筋肉疲労回復 (Relieving Muscle Fatigue)

- コンピューターを長時間使うことから来る頸肩腕症(首,肩,腕)コリ、痛みが緩和します。
- 首周り Motor Point(動く所)を捜して継続的に刺激することによって首、肩の疲れがとれます。
- 腕, 手首などへも痛い部位にタッチすると緩和されます。

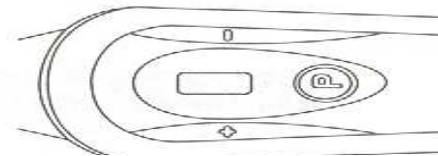

### モード設定:

極性スイッチ '-' または '+' を  
切り替える時には 3秒間押せば  
極性が転換されます

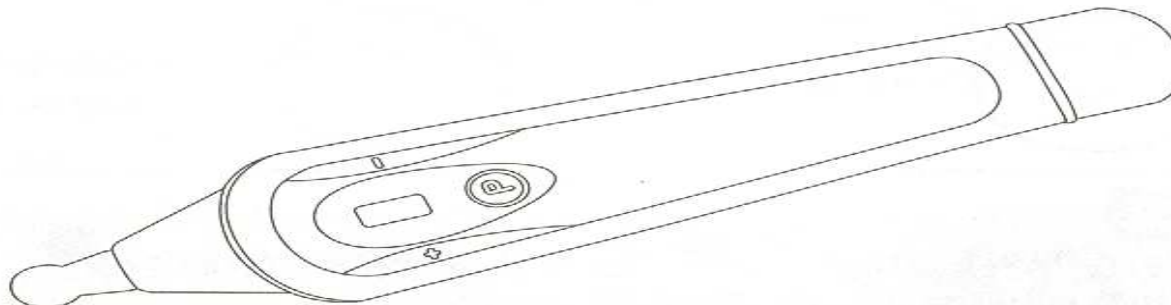


# ダイエット

肥満の原因は高カロリー食品を摂取することに原因はあるが、主な理由は「小脳」の脂肪質分解機能が正常にその機能が働いていない為肥満になるのです。

**使い方：**鍼ボールで毎日30分ずつ7日間位使用すれば、体重が減る効果を期待出来ます

**症状参照：** - 食欲が減る。  
- 気怠くて身に電流の流れを感じるようになります。  
- いつもより睡眠時間が長くなります。


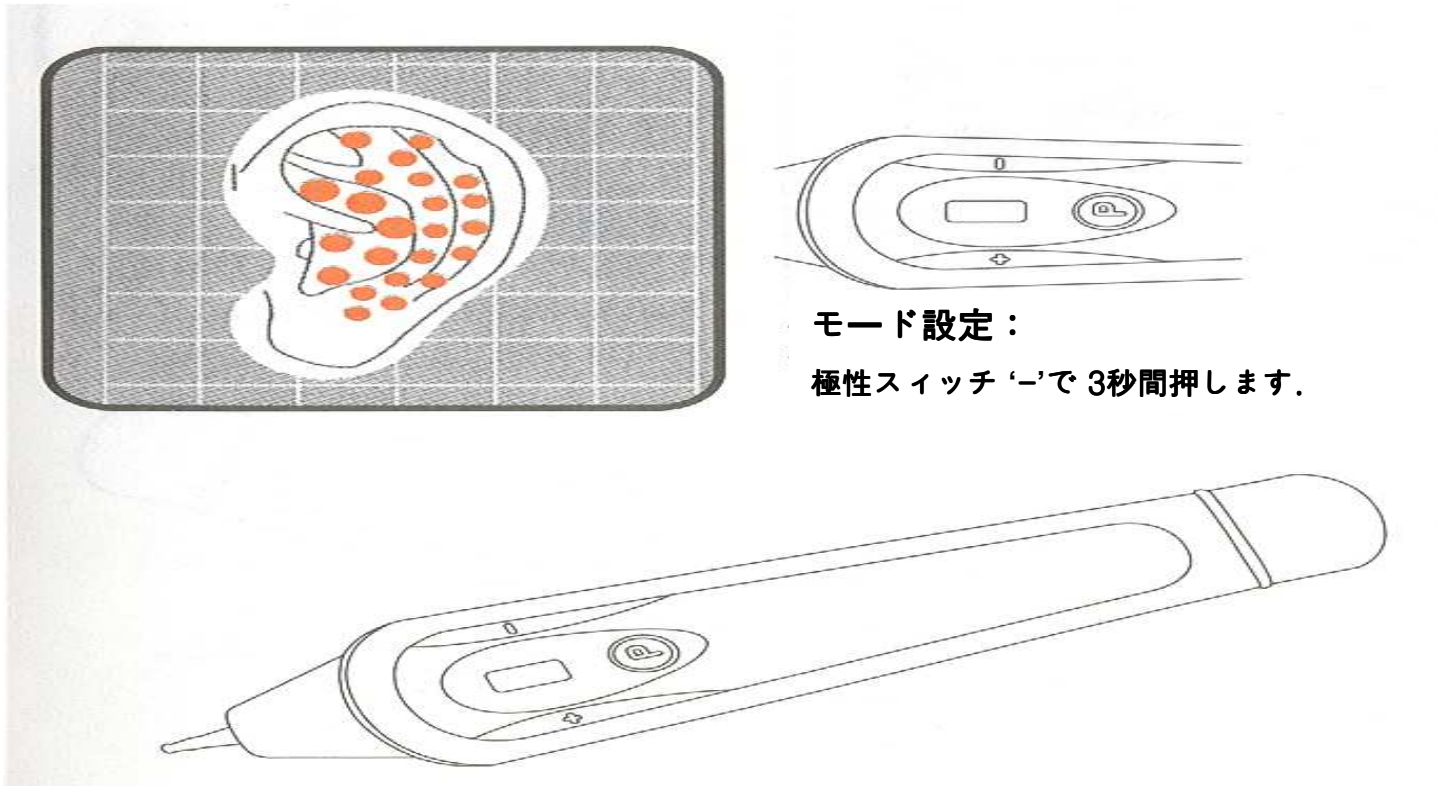


**モード設定：**  
極性スイッチ「-」で3秒間押します。

# 顔、肌などのマッサージ


(Facial Skin Massage)

寝る前、クレンジングクリームをつけて手で広くマッサージした後、顔用マッサージボールで毎日 5分ずつ肌に接触し刺激することで、シワの除去と肌に弾力を与える事が出来ます。マッサージ後に軽く洗顔してください

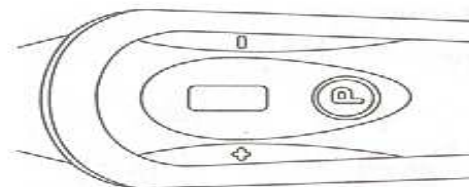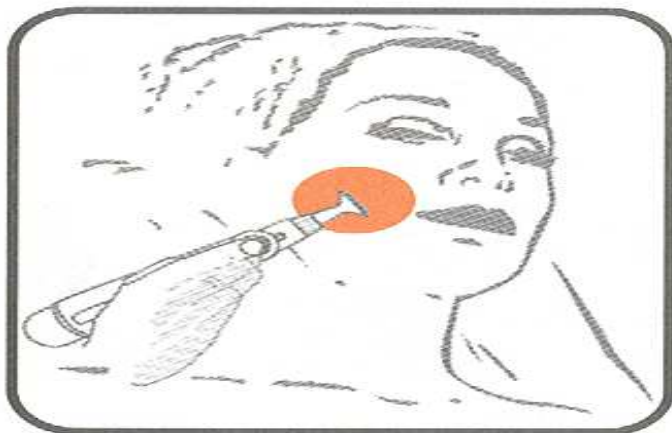

**モード設定：**



極性スイッチを3秒間押して '+' 極にします。

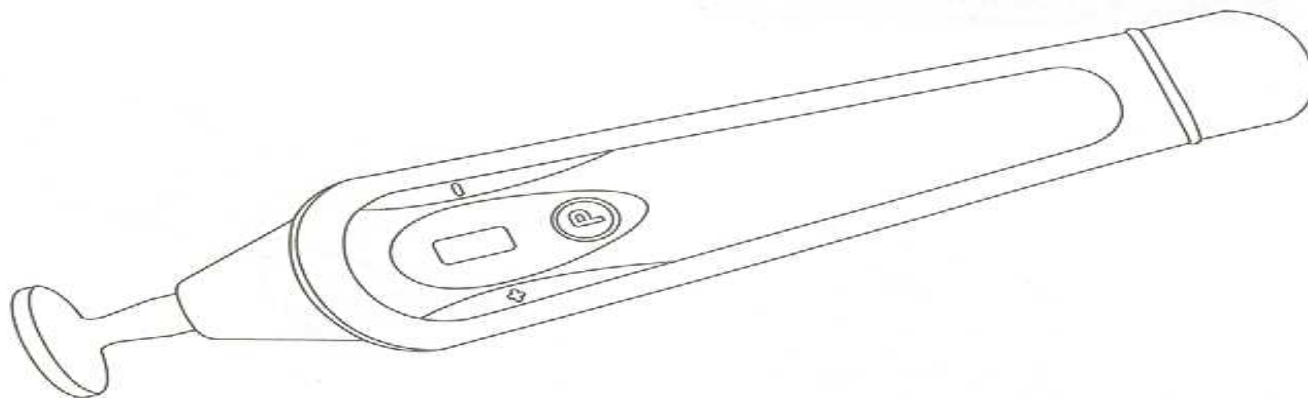


# 運動時に発生する痛みの緩和

運動中に打撲傷やあざが出来た時、捻挫、突然の筋肉硬直で痛みなどが発生した場合、患部にだけで痛みが緩和されます。ソフトな携帯小袋に入っているラパソンは健康を思う現代人の必需品です。

**使い方：**鍼ボールまたはモーターポイントボールを使ってください。  
患部に直接あてて下さい

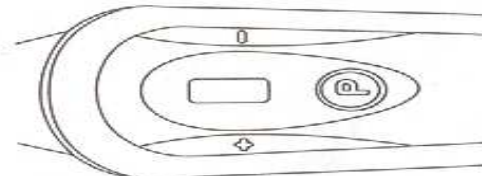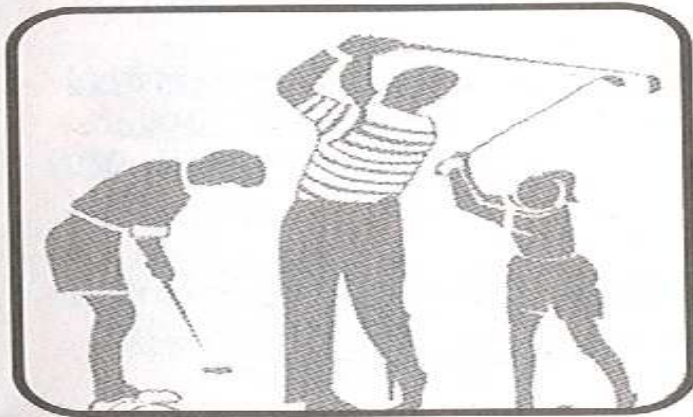

モード設定：  
極性スイッチを「-」で3秒間押します。

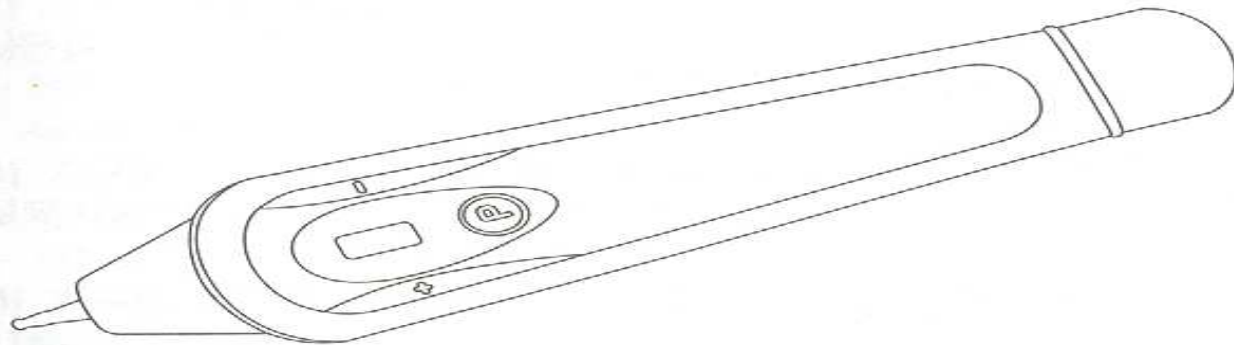

# 故障診断の反応

器具使用時, 何か問題が発生すれば下記事項を点検してください

問題	原因	措置
刺激を感じるできない時	度盛りレンズの数字を確認してください	使いたい強さの数字を捜して使ってください
刺激がとても弱い時	遠赤外線ランプを確認してください	新しいバッテリーに交換して下さい
取っている手に電流が通じる時	電流が手に来るのが正常です	ボリューム及び極性を適切に調節してください
体質によってかゆみ症がある時	過敏なアレルギー体質なので心配する必要はありません。	回数を減らして使ってください。痒い所に塩水を塗ればすぐに消えます
特異な体質で使用の後, 極度の疲れが来る時	虚弱な体質に現われることがあります	むしろ良い反応です。体質の改善による好転反応です

# 注意事項

## ■危険

この器具は次のような医療の装置と一緒に使用することは出来ません

1. 体内に移植された電子医療装置（ペースメーカーなど）
2. 電子生命補助機器, 例えば人工呼吸器
3. 身体に附着した電子医療機, 例えば心電図装置など
4. 上記以外の電子機器等を装着

## ■警告

次のような健康状態にある方はこの器具を使う前に専門医と相談して下さい。

- 1.慢性病 2.悪性腫瘍 3.感染症の方 4.妊娠中の方 5.心肺機能の障害 6.高熱がある方 7.血圧に乱れがある方
- 8.肌に異常がある方または皮膚病の方
- 9.医療中に苦痛を感じる方又は無理に使用されると事故や病気を誘発する恐れがあります。

この器具を心臓部には直接使用しないで下さい

- 事故や病気を誘発することがあります

この器具を取り扱い説明書で指示された以外の目的で使用しないで下さい

- 痛みや病気、事故を誘発することがあります

この器具の分解や改造をしないでください

- 故障で作動しないことがありますし、その場合の保証は致しません。

## ■注意

器具が正常に作動しないか、または使用中違和感があれば使用を中止してください

- 身体やお肌に不快感を感じた場合、医師と相談し医師の指示に従ってください

この器具を乳児や意思表示が出来ない方に対し使用しないで下さい

- 事故や病気を誘発することがあります

この器具をお風呂場、台所など湿気が多い場所,シャワー中には絶対に使用しないで下さい

- 強い電気ショックを誘発し故障の原因になります。

この器具を機械や自動車の運転中に使用しないで下さい

## 製品仕様

\* 本体の色、商品の構成などは予告なく変更することがあります。

製品名	個人用低周波治療器
モデル名	ラパソン
電源	3 Volt 電池(CR2バッテリー1個)
電池寿命	約3ヶ月(1日約30分使用時)
出力周波数	出力周波数約7番(回) / 秒
最大平均出力	13 $\mu$ A(負荷抵抗 500ohm)
大きさ	175mm(長さ) × 28mm(直径)
重さ	90g